

Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Inzisions-Instrumenten – welches benötigen Sie für Ihre Patienten?

## tenderfoot®



Tenderfoot® für Fersenpunktion bei Neugeborenen und Kleinkindern – eine sichere und effiziente Methode der Blutentnahme.

- Das Resultat ist eine hochwertige Blutprobe mit signifikant weniger Schmerzen und Trauma bei Babys empfindlicher Haut
- Keine Fersenwärmer, keine Wiederholung der Blutentnahme oder exzessives Drücken der Ferse nötig
- Erhältlich in vier unterschiedlichen Inzisionstiefen: für Frühchen bis zu Kleinkindern

## Tenderlett®



Tenderlett® ist so gestaltet, dass es sich den Fingerkonturen optimal anpasst.

- Bietet eine standardisierte Länge und Tiefe bei jedem Bluttest
- Farbcodierung für leichtes Erkennen
- Erhältlich in drei unterschiedlichen Inzisionstiefen von Kleinkind bis Erwachsene

## Surgicutt®




Surgicutt® Blutgerinnungszeit-Tests werden verwendet um die Plättchenfunktion zu bestimmen.

- Erhältlich für drei verschiedene Altersgruppen: Neugeborene, Kinder und Erwachsene
- Für die Test benötigte Saugplättchen sind einzeln verpackte ebenfalls von ITC erhältlich
- Farbcodierung für leichtes Erkennen


## ITC INZISIONS-TECHNOLOGIE

Unsere patentierten Instrumente erzeugen einen geschwungenen Einschnitt oberhalb der schmerzempfindlichen Nerven. Die Klinge zieht sich sofort wieder in das Instrument zurück – dies schließt eine Verletzungsgefahr aus. Das Ergebnis ist eine hochwertige Blutprobe frei von Kontamination durch Gewebe. Unsere Instrumente sind sicher, einfach in der Handhabung und nahezu schmerzfrei mit weniger Blutergüssen im Vergleich zu herkömmlichen Lanzetten.

**ITC Inzision**

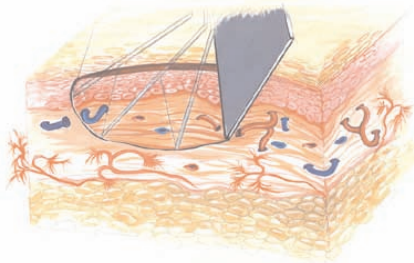

**herkömmliche Punktion**

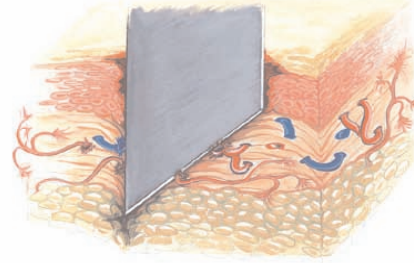

## BESTELLINFORMATION

Produkt	Einsatzgebiet	Bestell-Nummer	Farbe	Einschnitt-Tiefe	Einschnitt-Länge
<b>tenderfoot</b>					
Micro-preemie	<1000 grams	TFM50I	blau	0,65 mm	1,40 mm
Preemie	NIEDRIGES Geburtsgewicht	TFP50I TFP200I TFP1000I	weiß	0,85 mm	1,75 mm
Newborn	Geburt bis 3-6 Monate	TF50I TF200I TF1000I	rosa/blau	1,00 mm	2,50 mm
Toddler	6 Monate bis 2 Jahre	TFT50I	rosa	2,00 mm	3,00 mm
<b>Tenderlett</b>					
Tenderlett	Erwachsene/große Kinder	TL100I TL5000I	roter Auslöser	1,75 mm	0,94 mm
Junior	Kinder	TLJ100I TLJ5000I	blauer Auslöser	1,25 mm	0,67 mm
Toddler	größere Säuglinge/Kleinkinder	TLT100I TLT5000I	rosa Auslöser	0,85 mm	0,46 mm
<b>Surgicutt</b>					
Surgicutt	Erwachsene	SU50I SUB50I (w/ paper)	weiß/ Auslöser gold	1,00 mm	5,00 mm
Junior	Kinder	SUJ50I	lavendel/ Auslöser lila	1,00 mm	3,50 mm
Newborn	Säuglinge	SUN100I	gelb/ Auslöser orange	0,50 mm	2,50 mm
Saugplättchen	alle Altersstufen	SUP100I	weiß	Durchmesser 9,0 cm	

Tenderlett, tenderfoot and Surgicutt are registered trademarks of ITC.



8 Olsen Avenue • Edison, NJ 08820 USA  
tel: 732.548.5700 • fax: 732.248.1928  
www.itcmed.com

a subsidiary of Thoratec Corporation